

Agrafeuse cutanée à usage unique

Agrafeuse Manipler® AZ
Agrafeuse ADVAN®
Ôte agrafes



Manipler® AZ et ADVAN®


Manipler® AZ et ADVAN® sont des agrafeuses cutanées stériles à usage unique qui contiennent 35 agrafes en acier inoxydable. Elles permettent de refermer la peau à la fin des interventions chirurgicales.



Indications

Les agrafeuses cutanées Manipler® AZ et ADVAN® sont utilisables pour la fermeture cutanée dans un large éventail d'actes chirurgicaux :

- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Orthopédie
- Chirurgie thoracique
- Chirurgie cardiovasculaire
- Urologie
- Autres

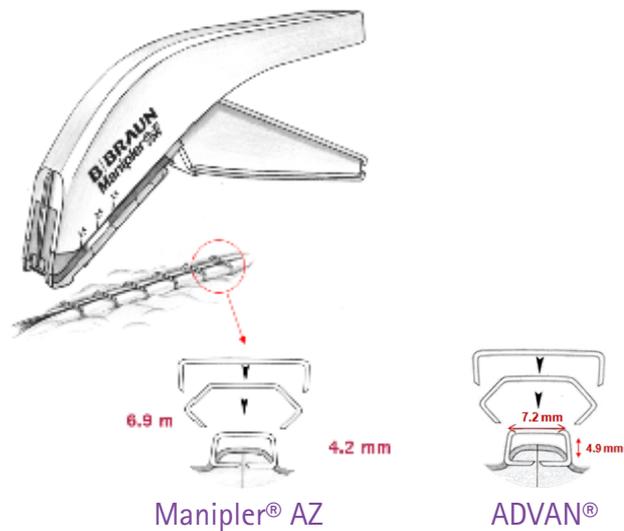

Manipler® AZ & ADVAN®


Caractéristiques

- Agrafeuse cutanée stérile à usage unique
- Préchargée avec 35 agrafes en acier inoxydable SS316L
- Taille de l'agrafe de la Manipler® AZ : 6.9 mm x 4.2 mm
- Taille de l'agrafe de la ADVAN® : 7.2 mm x 4.9 mm


Avec les 35 agrafes préchargées, vous pouvez fermer une plaie de 25 cm de long. Les agrafes doivent être insérées avec un angle de 45° ou 60° et être espacées de 0,5 à 0,7 cm pour la Manipler® AZ et 0,5 à 1 cm pour la ADVAN®.

Mode d'emploi

1. A l'aide de deux pinces, tirez pour rapprocher les berges de la plaie

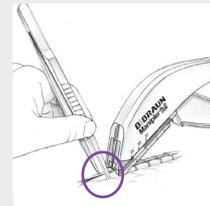


2. Positionnez l'agrafeuse au centre des berges de peau avec un angle de 60°

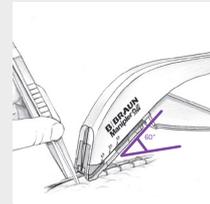


3. Pour former l'agrafe, appuyez fermement sur la gâchette jusqu'à la résistance



4. Relâcher la gâchette

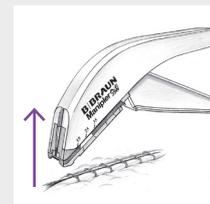

5. Retirez l'agrafeuse, vérifiez toujours la bonne position des agrafes

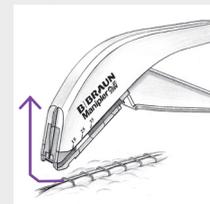

Référence

Description	Référence	Nombre d'unités par boîte
Manipler® AZ	783100	6
ADVAN®	783106	5

Ôte-agrafe

Le ôte-agrafe à usage unique est conçu pour enlever rapidement et facilement tous les types d'agrafes chirurgicales cutanées.



Ôte-agrafe à usage unique



Ôte-agrafe à usage unique ADVAN®

Indication

Retrait des agrafes chirurgicales cutanées.

Référence

Description	Référence	Nombre d'unités par boîte
Ôte-agrafe à usage unique	783101	6
Ôte-agrafe ADVAN®	783104	20

Ôtes-agrafe pour agrafes cutanées

Manipler® AZ est une agrafeuse cutanée à usage unique utilisée pour la fermeture de différentes sortes de plaies dans un certain nombre d'interventions chirurgicales. Dispositif médical de classe IIa. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE0123)

Ôte agrafe à usage unique. Dispositif médical de classe Is. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE0123)

Fabriqués par : Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

ADVAN® est une agrafeuse cutanée à usage unique utilisée pour la fermeture de différentes sortes de plaies dans un certain nombre d'interventions chirurgicales. Dispositif médical de classe IIa. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE0123).

Ôte agrafe à usage unique ADVAN. Dispositif médical de classe Is. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE0123).

Fabriqué par : Ningbo AdvanElectrical Co., Ltd. | Industrial Development Zone | Fuhai Town | Cixi City | China

Distribués par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr |

SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou l'étiquetage.

Produit non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale)

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photos non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Edition 12/2023

302001P_20231207_20281207